

Vasconcellos<sup>®</sup>

*Picosegundo/  
Pico lasers*




Super Picosegundo  
*Láser 500PS*

VASCONCELLOS


[www.vasconcellos.com.mx](http://www.vasconcellos.com.mx)

## Generador láser:

Estado sólido y tecnología de amplificación MOPA, la energía es más estable y efectiva.

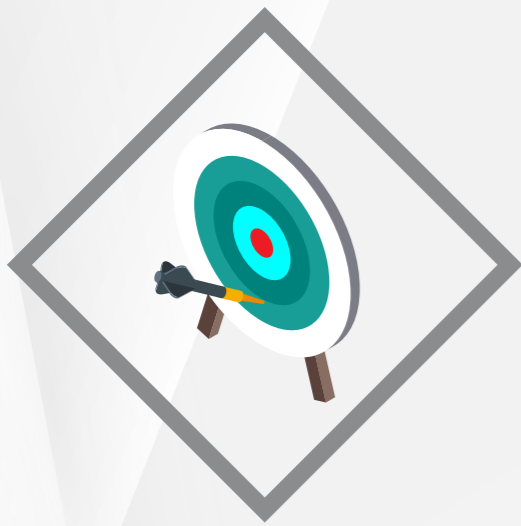

PRECISO

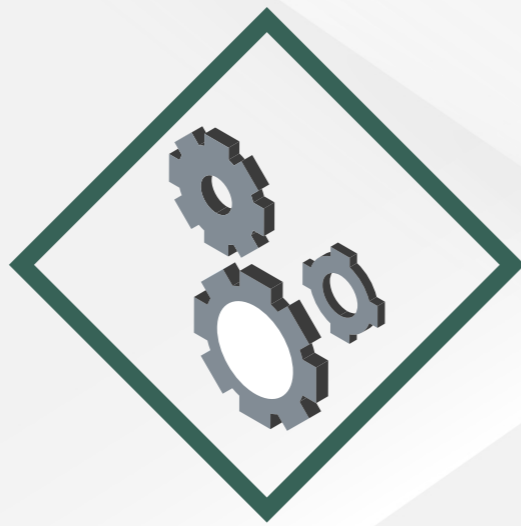

EFICAZ



SEGURO



DURADERO

## Sondas de tratamiento.

### Sondas de tratamiento 1064nm:

Para tatuajes negros, manchas solares, manchas de café, cloasma, rejuvenecimiento de piel.

### Sondas de tratamiento 532nm:

Para tatuaje rojo, marrón, amarillo, ota, pecas, manchas de vino de oporto.

### Sondas de tratamiento 660nm:

Para eliminación de tatuaje verde.

### Sondas de tratamiento 585nm:

Para eliminación de tatuaje azul y púrpura.

### Sonda fraccionada:

Tratamiento de poros dilatados y marcas de acné.

## Modos de tratamiento:

SP, LP, PTP, muy eficaz para todos los tipos complicados de pigmentación.

Hecho en Corea:

7 brazo láser articulado, eficiencia de transmisión hasta 85%.



Lámparas láser y lentes:

Importados de EE. UU., Pulso real: 500PS (probado por el osciloscopio).


Modo de haz de sombrero plano, densidad de energía uniforme:

Asegúrese de que la energía se entregue de manera eficiente para maximizar el efecto y minimizar el daño al tejido circundante;


Modo perfecto de "Top-Hat":

El verdadero modo de salida "Top-Hat" logra una distribución uniforme de energía sin puntos calientes locales. Puede ser efectivamente absorbido por pigmentos objetivo y evitando traumatismos en la piel normal.;

Modo perfecto de "Top-Hat"

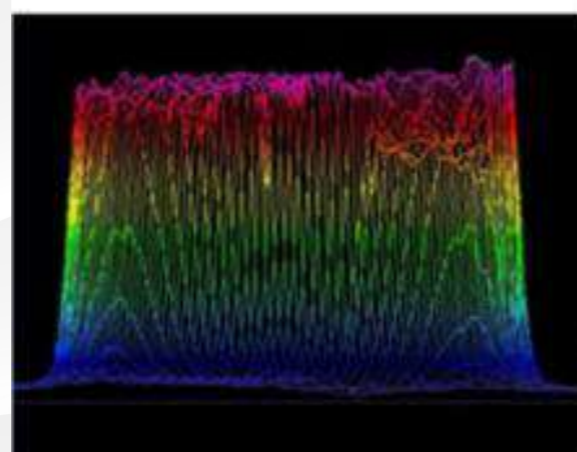

Puntos de Luz de Otros Productos

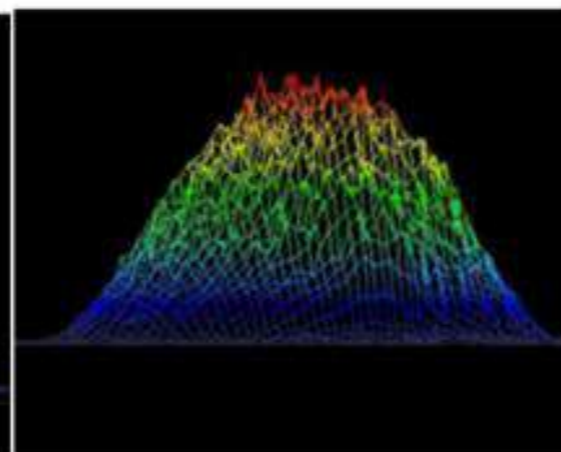


## Nano vs Pico

Nano vs Pico (Láseres Picosegundo son aproximadamente 10 veces más rápidos que los láseres de nanosegundos).

- ❖ Debido a la duración del pulso ultracorto y alta potencia de Pico Laser, rompe la pigmentación en fragmentos mucho más pequeños en comparación con un Nano Láser.
- ❖ Pico Laser elimina los fragmentos de pigmento de forma más rápida, más eficaz y con menos sesiones de tratamiento.
- ❖ Picosegundo/Pico Laser son más seguros con menores riesgos de efectos secundarios.

## Aplicación:

- ❖ Retiro del tatuaje (todo el tatuaje del color, eyeliner y retiro del lipline).
- ❖ Pigmento de la epidermis y del dermis (retiro de las lesiones Pigmented, manchas solares, manchas de café, cloasma).
- ❖ Tratamiento de la cicatriz del acné, nevo de Ota, nevo azul, nevo negro.
- ❖ Blanqueamiento de la piel y eliminación de arrugas.

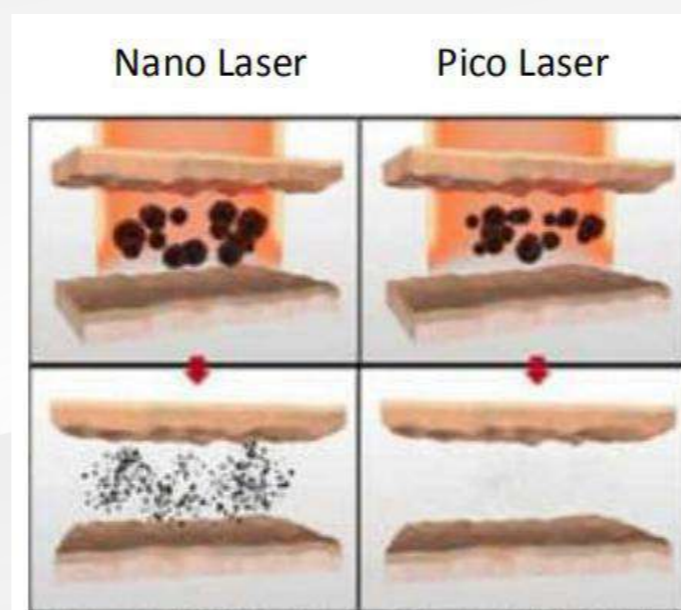





## PARAMETROS TÉCNICOS

Longitud de onda	1064nm, 532nm(585nm, 660nm, 755nm opcional).
Energía de salida	1300mJ@1064nm, 550mJ@532nm
Duración del pulso	600PS@1064NM, 500PS@532NM
Tamaño de punto	2-10mm (ajustable)
Frecuencia	1-10 HZ
Modo de tratamiento	SP, PTP, LP
Tamaño de paquete	96*89*51cm y 90*34*18cm
Peso del paquete	103kg y 4.7kg
Voltaje	110V/220V

# Vasconcellos®

Super Picosegundo  
*Láser 500PS*



 Tel: 55 7822 8045

 Cel: 55 8300 8832

 [vasconcellosventas@gmail.com](mailto:vasconcellosventas@gmail.com)

 [www.vasconcellos.com.mx](http://www.vasconcellos.com.mx)