

Vasconcellos[®]

*Lifting facial /
Adelgazamiento /
Eliminación de arrugas*





ULTRA
LIFT

VASCONCELLOS


www.vasconcellos.com.mx

4D HIFU:

Puede alcanzar hasta 12 líneas a la vez, lo que reduce mucho tiempo de tratamiento.

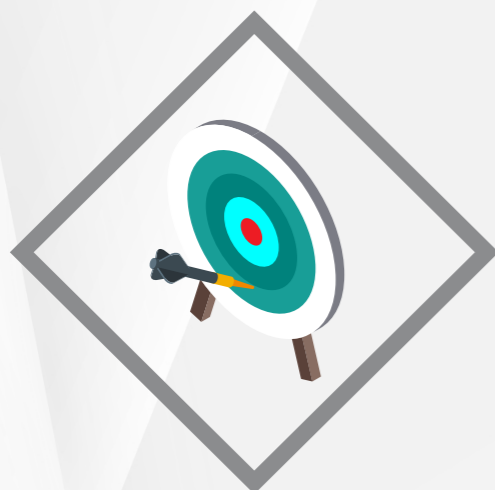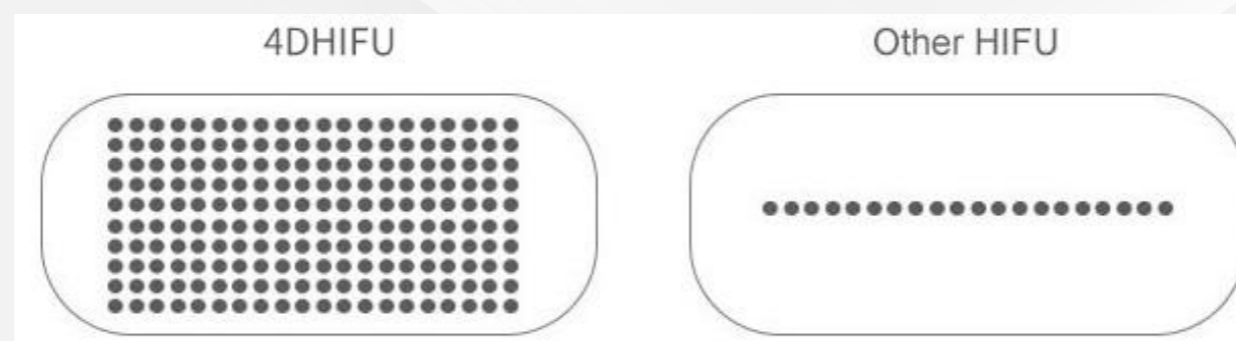

PRECISO

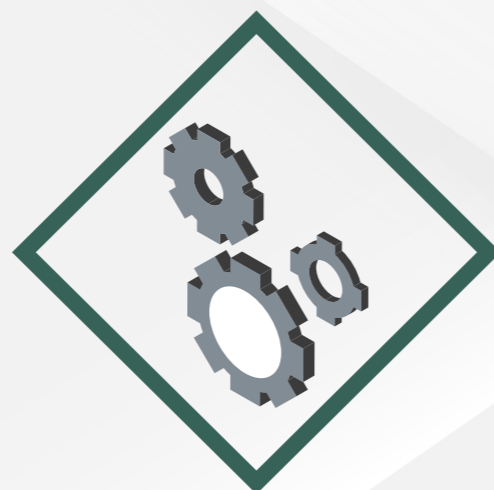

EFICAZ



SEGURO



DURADERO

Cartuchos:

Cinco cartuchos estándar (1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 6.0mm, 13mm) para cara y cuerpo, tres cartuchos opcionales (8mm, 10mm, 16mm) para cuerpo.

Disparos:

20000 disparos/cartucho, mayor vida útil que máquinas similares.

Modos:

Modo profesional y modo guía opcional, fácil de operar.

Efecto de tratamiento:

Puede durar al menos 18 ~ 24 meses

Sin dolor, invasivo y tiempo de inactividad.



1.5mm para la capa superior de la dermis




3.0mm es para la capa de la dermis



4.5 mm es para capa SMAS, estiramiento de la piel



6.0mm/8mm/10mm/13mm/16mm es para la capa de grasa

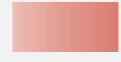

1.5mm, 3mm, 4.5mm, 6mm, 13mm (Estándar)






8mm, 10mm, 16mm (Opcional)

Teoría:

- ❖ El HIFU enfoca el ultrasonido de alta energía en una ubicación específica y convierte la energía acústica en calor. La situación es como usar una lupa para enfocar la luz en un punto, excepto que el ultrasonido enfocado penetra profundamente en la piel (capa SMAS) sin ser bloqueado por la epidermis y la dermis. Con un control preciso, el ultrasonido solo se enfocará en ubicaciones específicas para producir puntos calientes pequeños y precisos que no se verán afectados en otros lugares.
- ❖ Aplique ultrasonido enfocado de alta intensidad para generar energía enfocada y vaya a la celulitis para romperla. Es un tratamiento eficaz no invasivo, impresionante y duradero para reducir la grasa, especialmente para el abdomen y los muslos. Los objetivos HIFU con una grasa de 13mm (profundidad de penetración), calentando el tejido graso, resuelven la grasa.

Medical Grade Skin Treatment

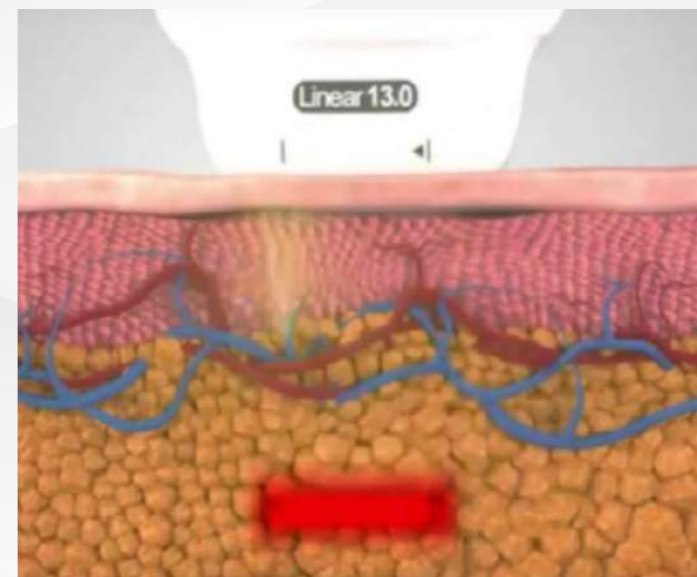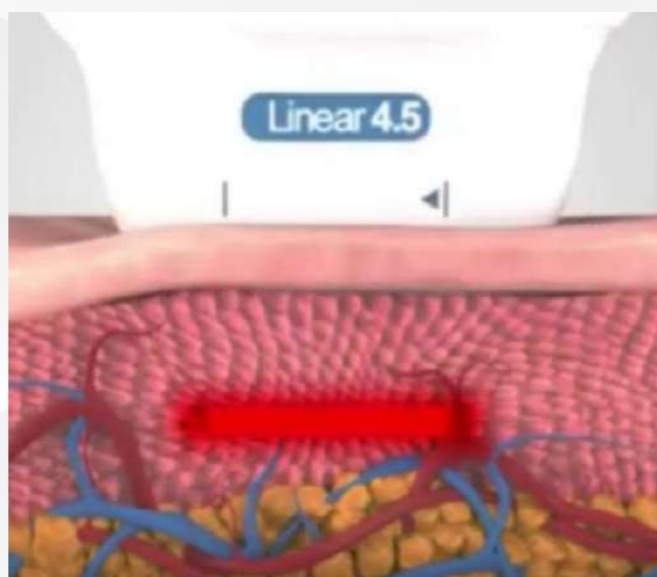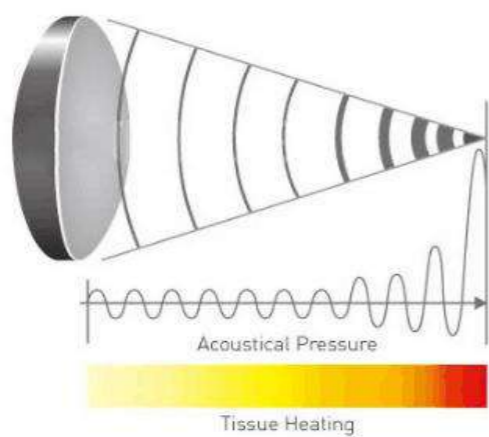

Aplicaciones:

- ✓ Eliminación de arrugas
- ✓ Rejuvenecimiento de piel
- ✓ Adelgazamiento corporal
- ✓ Estiramiento de la piel
- ✓ Lifting Facial
- ✓ Remodelación de colágeno



Lifting facial



Adelgazar



Cara



Atrás



Cuello



Línea de cuello




Línea de la frente




Caderas



Brazos

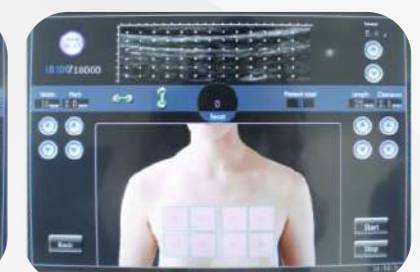

Cofre

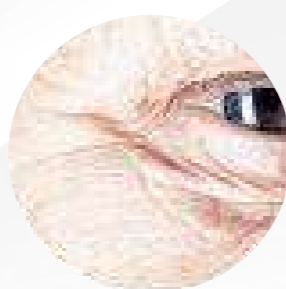

Patas de gallo



Línea de labios



Abdomen



Muslos



Cañas

RESULTADOS GARANTIZADOS



PARAMETROS TÉCNICOS

Potencia de salida	1000W
Cartuchos	1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 6.0mm, 13.0mm(Estándar) 8.0mm, 10.0mm, 16.0mm(Opcional)
Anchura	0~11mm
Longitud	5~25mm
Despeje	1~5mm
Tono	1~5mm
Potencia	0.1~3J
Voltaje	220V/110V, 50/60HZ
Tamaño del paquete	64*64*32cm
Peso del paquete	27kg

Vasconcellos[®]



ULTRA
L97T



 Tel: 55 7822 8045

 Cel: 55 8300 8832

 vasconcellosventas@gmail.com

 www.vasconcellos.com.mx